


# Conveen : Saco colector de Urina Security +



## Um saco de perna discreto, fiável e confortável

- O tubo ondulado permite a passagem livre da urina em qualquer posição oferecendo uma maior discricção
- Pelo facto de ser selado centralmente, garante a máxima discricção, mesmo quando cheio
- Válvula de abertura segura e de fácil de manuseamento
- A qualidade dos materiais garante uma segurança a 100%

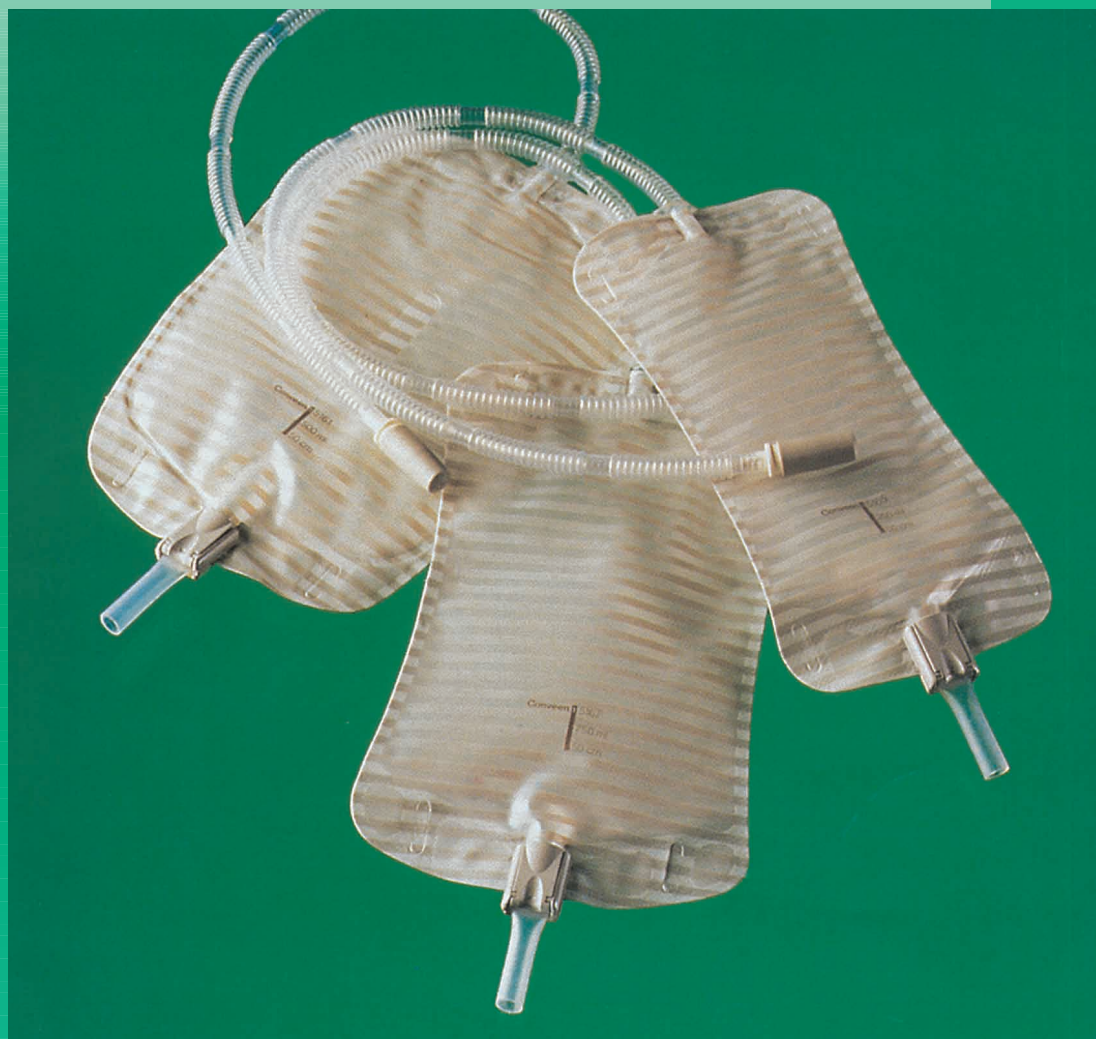

Coloplast

# Conveen : Saco colector de Urina Security+

O critério mais importante na escolha de um saco colector de urina é a sua discrição e segurança. O saco colector de urina Security+ da **Conveen** oferece isto e muito mais.




## Uma passagem sempre livre

Independentemente do tubo ondulado de entrada estar dobrado ou torcido, apresenta sempre a sua característica de anti- bloqueio, não permitindo o refluxo. Ainda a flexibilidade excepcional do tubo permite seguir os movimentos naturais da perna, tornando-o tão discreto quanto ao saco. No caso de ser demasiado comprido, o tubo pode ser cortado com uma tesoura. As partes mais suaves da parede interna do tubo impedem a migração ascendente de bactérias, assegurando assim a protecção higiénica.



## Máxima discrição

O saco é selado centralmente formando uma barreira interna parcial que permite que a urina fique igualmente distribuída dentro das duas bolsas. Isto tem uma dupla função: torna o saco mais plano, tornando-o menos visível, e impede também o ruído provocado pela queda de urina num saco parcialmente cheio. Torna-se simplesmente mais discreto.

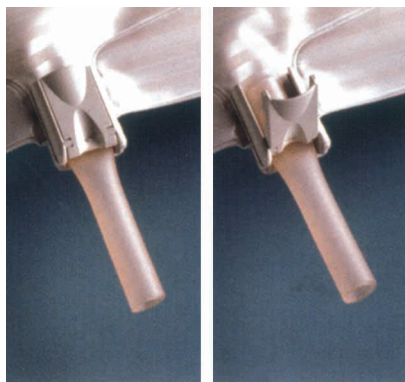

## Válvula de abertura segura

A válvula de abertura garante um fecho seguro e estanque. A fim de evitar enganos, a válvula é concebida para facilmente se verificar se está devidamente fechada. Além desta segurança, um clique audível indica o seu completo fecho. A válvula é fácil de manusear, mesmo por aqueles que dispõem de destreza limitada.



## Outras características para maior segurança e conforto

- Selado centralmente para dupla segurança.
- Válvula anti-refluxo, torna o saco mais higiénico.
- Ligação segura ao dispositivo urinário (*Penrose*).
- Parte posterior suave, permite que a pele respire oferecendo um maior conforto.
- O saco, feito em PVC é suave e leve.
- Correias ajustáveis para segurar os sacos de perna com maior segurança e conforto.



## Gama de Produtos

N.º	Comprimento do tubo/ cm	Volume/ ml
5164	25	350
5160	25	500
5162	25	500*
5166	25	750
5165	50	350
5161	50	500
5163	50	500*
5167	50	750
50501	Correias para saco de perna	



\* Estéril (só disponível em alguns países)  
Unidades por caixa: 10 \*10  
Unidades por encomenda: 100 \*120



## Sistema colector Conveen

O saco colector de urina **Conveen Security +** pertence a um sistema colector que inclui: dispositivos urinários de uma e duas peças **Conveen**, saco colector de urina **Conveen** com canais múltiplos e saco colector de urina de 1500 ml.



Coloplast A/S  
Rua Gorgel do Amaral nº 4 - cv Dta.  
1250-119 Lisboa  
Telef.: +351 21 38 38 626  
Fax: +351 21 38 38 628  
www.export.coloplast.com

## Importador e Distribuidor:

**MUNDINTER Intercâmbio Mundial de Comércio, S.A.**  
(Consultas e Concursos)  
Av. António Augusto Aguiar 138  
1069-132 Lisboa  
Telef.: 213 81 99 00 (15 Linhas)  
Fax.: 213 87 35 70  
Lojas: Lisboa - Telef.: 213 81 99 80  
Porto - Telef.: 225 50 48 62/3  
Coimbra - Telef.: 239 82 82 56  
www.mundinter.pt